

LIV® IQ. Simply clever.



Kenmerken

- LCD beeldscherm dat alle relevante informatie weergeeft.
- Display met resterende tijdsduur en bijhorende alarmeren wanneer het inhoudsniveau kritisch wordt.
- Inhoudsindicator die altijd de werkelijke druk in de cilinder weergeeft.
- Aan/uit afsluiter met "on/off" indicatie.
- 12 flowinstellingen (inclusief flowpositie "0").
- Alarm wanneer de flowregelaar niet juist gepositioneerd is: om veiligheidsredenen zal de flow tussen de instellingen in altijd continueren.
- Snelkoppeling om apparatuur eenvoudig aan te sluiten op de LIV IQ.
- Ergonomisch ontwerp.
- MRI compatibel.

Medicinale zuurstof

Zuiverheid	≥ 99,5 vol %
Verontreiniging	CO ₂ ≤ 300 vpm
	H ₂ O ≤ 67 vpm
	CO ≤ 5 vpm
Conformiteit	Europese Farmacopee
Productie	Conform GMP

Flow

Flowinstellingen via slangtule (l/min)	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25		
Maximale flow (l/min)	133 l/min		
Flowuitgang	Slangtule		
Flowtolerantie	¼ ≤ F ≤ 2½ l/min 20%	2½ < F < 4 l/min 15%	4 l/min ≤ F 10%

Beeldscherm

LCD beeldscherm	Toont de ingestelde flow en het flowsymbool, resterende tijdsduur en alarm iconen in geval van alarm.	
Inhoudsindicator	Actief = toont altijd de cilinderdruk	Kleurcodering 100%–50% groen, 50%–25% geel, 25%–0% rood


Temperatuur	Opslagtemperatuur	-40 tot + 65°C
	Gebruikstemperatuur	-20 tot + 45°C

Specificaties	Drukuitgang	DIN snelkoppeling 4,5 bar
	MRI compatibel	LIV IQ gemonteerd op aluminium cilinders kan op ten minste 30 cm van de magneetopening worden gehouden bij MRI systemen ≤ 3,0T.
	LIV IQ = Medisch hulpmiddel	CE-gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 93/42 EEG Medische hulpmiddelen.

Inhoud	Configuratie	LIV IQ 2 ltr	LIV IQ 5 ltr
	Lengte	50,5 cm	62 cm
	Diameter afsluiterkap	115 mm	115 mm
	Diameter cilinder	102 mm	140 mm

Cilindermateriaal	Cilindermateriaal	Aluminium 7060	Aluminium 7060
	Gewicht leeg	3,65 kg	6,6 kg
	Gewicht vol	4,19 kg	8 kg
	Inhoud gas liter	400 liter	1.000 liter

LIV IQ maximale flow kenmerken DIN Snelkoppeling

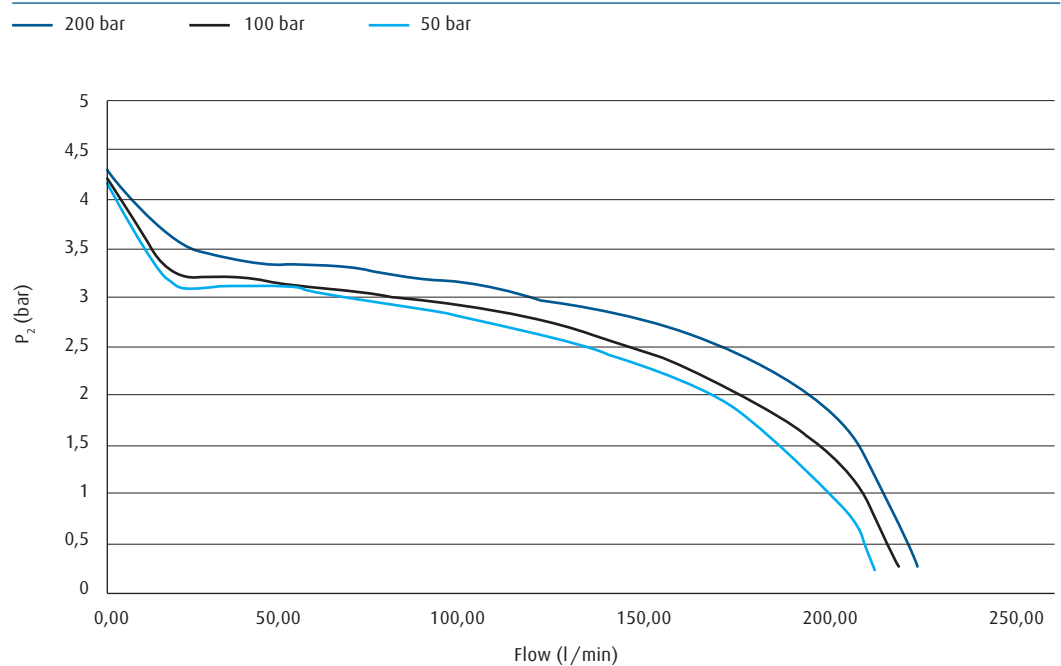

Linde Healthcare Benelux

Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven

Tel. +31 40 2825825, Fax +31 40 2816875, info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

Voor België: Westvaardijk 85, 1850 Grimbergen

Tel. +32 70 233826, Fax +32 70 233828, info.healthcare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be